

Lampe stylo de poche - Pocket penlight



FR → Ce matériel est conforme aux exigences de la Directive 93/42 CEE relative aux dispositifs médicaux.

DESCRIPTION

Boîtier avec clip de fixation en aluminium résistant aux chocs.

Manche à piles équipé d'une ampoule à LED (2,8 V - 20 mA).

Accessoires fournis : 2 piles alcalines LR03 AAA et 1 support d'abaisse-langue adapté à tous les abaisse-langues standards.

MODE D'EMPLOI

Mise en place des piles

Dévisser la tête du stylo et insérer les deux piles dans le manche en respectant bien les polarités (+) et (-).

Marche/Arrêt

Pour allumer en discontinu ou éteindre la lampe, appuyer sur le poussoir noir Marche/Arrêt. Pour allumer la lampe en continu, appuyer sur la partie haute du clip de fixation.

MAINTENANCE

Remplacement des piles

Dévisser le manche du stylo, retirer les deux piles usagées et insérer deux nouvelles piles alcalines LR03 AAA dans le manche en respectant bien les polarités (+) et (-).


Remplacement de l'ampoule à LED

Dévisser la tête du stylo et retirer l'ampoule encastrée en la poussant de l'extérieur vers l'intérieur. Insérer la nouvelle ampoule en la poussant simplement de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'au fond du réceptacle.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Ne pas mouiller, ne pas immerger dans un liquide.
- Eviter l'exposition prolongée aux rayons du soleil et aux températures extrêmes.
- Placer hors de portée des enfants.
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

Températures de fonctionnement et de stockage : + 10°C à + 40°C.

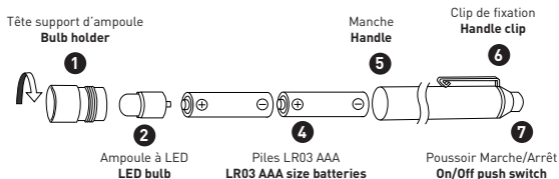

EN → This material complies with the requirements of the 93/42/EEC Medical Device Directive.

DESCRIPTION

Shock-resistant aluminium casing and handle clip.

Battery handle equipped with a LED bulb (2.8 V - 20 mA).

Accessories included: 2 LR03 AAA size alkaline batteries and 1 blade holder designed for all conventional tongue depressors.

INSTRUCTIONS FOR USE

Inserting the batteries

Unscrew the bulb holder and insert the two batteries into the handle making sure they are aligned correctly (+) and (-).

On/Off procedure

Press the on/off black push button to switch the light on intermittently. Release the button to switch the light off. To switch on the light permanently, press the upper part of the handle clip.

MAINTENANCE

Replacing the batteries

Unscrew the handle from the bulb holder, remove the low batteries and replace them with two new LR03 AAA size alkaline batteries, making sure they are aligned correctly (+) and (-).

Replacing the bulb

Unscrew the bulb holder from the handle and remove the bulb from the holder by pushing it from the outside towards the inside. Then insert the new bulb into the holder by pushing it forwards.

WARNING

- Do not soak, do not immerse into liquids.
- Avoid prolonged exposure to direct sunlight and to extreme temperatures.
- Place beyond children's reach.
- Remove batteries if the equipment is not to be used for a long time.

Operating and storage temperatures: + 10°C to + 40°C.